

Contour plus

Système d'autosurveillance glycémique

FR

Vérifiez si vous pouvez enregistrer votre lecteur de glycémie en ligne sur www.diabetes.ascensia.com/registration



Votre lecteur de glycémie CONTOUR PLUS




Utiliser uniquement la bandelette réactive CONTOUR PLUS

Extrémité grise :

Insérez cette extrémité dans le port d'insertion.

Zone d'aspiration de l'échantillon sanguin :

c'est par là que l'échantillon sanguin est absorbé.

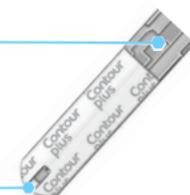


Consultez le manuel d'utilisation CONTOUR PLUS et la notice de l'autopiqueur pour obtenir des instructions complètes.

ATTENTION : Risques biologiques potentiels


- Toujours se laver les mains avec de l'eau savonneuse et bien les sécher avant et après le test, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.
- L'autopiqueur (quand fourni dans le set) est destiné à l'autosurveillance glycémique par un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.

Test de base - Sur le bout du doigt

1. Retirer l'embase de l'autopiqueur.
2. Desserrer le capuchon protecteur rond d'une lancette en le faisant tourner d'1/4 de tour, mais sans le retirer.

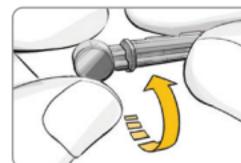


3. Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée.

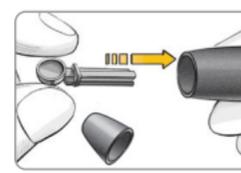


4. Enlever le capuchon protecteur rond de la lancette.




5. Replacer l'embase.

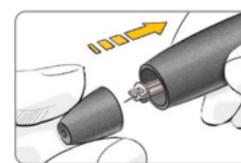

6. Régler la molette de l'embase selon la profondeur de piqûre souhaitée.

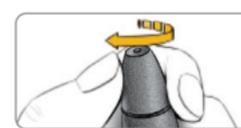

7. Introduire l'extrémité grise de la bandelette réactive dans le port d'insertion du lecteur.

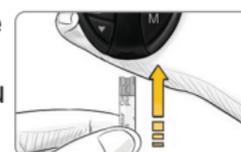

Le lecteur de glycémie s'allume et une bandelette réactive avec une goutte de sang clignotante s'affiche à l'écran. Le lecteur est désormais prêt pour le test.

8. Presser fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement et appuyer sur la touche de commande.



Masser la main et le doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.

9. Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang. **Maintenir la bandelette dans la goutte de sang jusqu'à ce que le lecteur de glycémie émette un signal sonore.**



Test sur le bout du doigt

Si la première goutte de sang n'est pas suffisante, le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores. Vous avez environ 30 secondes pour appliquer plus de sang sur la même bandelette réactive. Le résultat du test s'affiche après un décompte de 5 secondes.



10. Pour désactiver le lecteur de glycémie, retirer la bandelette réactive.

ATTENTION

Risques biologiques potentiels

- Éliminer systématiquement les bandelettes réactives et les lancettes usagées comme tout autre déchet médical ou conformément aux recommandations de votre professionnel de santé.
- L'autopiqueur (quand fourni dans le set) est destiné à l'autosurveillance glycémique par un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.

Petites pièces

- Tenir hors de la portée des enfants. Ce kit contient de petites pièces, susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées.
- Conserver les piles hors de la portée des enfants. Divers types de piles sont toxiques. En cas d'ingestion, contacter immédiatement un centre antipoison.

Besoin d'aide ?

www.diabetes.ascensia.com

NO CODING
SANS CODAGE

MANUEL
D'UTILISATION
SIMPLIFIÉ



ATTENTION : Risques biologiques potentiels

Tous les systèmes d'autosurveillance glycémique sont considérés comme présentant des risques de contamination biologique. Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système sur différents patients doivent respecter les procédures de contrôle des risques d'infection en vigueur dans leur établissement pour la prévention des maladies transmises par le sang.

Utilisation du mode Avancé

Paramétrage de votre lecteur de glycémie en mode Avancé

Pour régler votre lecteur en mode Avancé et bénéficier des marqueurs prandiaux (repas) et autres fonctions disponibles :

1. Appuyer sur **M** pour activer votre lecteur de glycémie.
2. Appuyer et maintenir enfoncé ▲ ou ▼ pendant 3 secondes.
3. L-1 clignote.
4. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour passer en L-2.
5. Appuyer sur **M** pour confirmer.



Découvrez comment ces fonctions supplémentaires peuvent vous aider à mieux gérer votre diabète.

Contactez le service clientèle
www.diabetes.ascensia.com

Après avoir réalisé une mesure et consulté vos résultats, utiliser les marqueurs sur l'écran :

Pour marquer les résultats >	Vous verrez >	Pour régler >	Vous verrez >	Cela signifie >	Utilisation du Rappel
Avant repas Marque un résultat de test effectué avant le repas. Appuyer sur ▲ ou ▼	 (Clignote)	Appuyer sur M		Le résultat est marqué comme test préprandial (avant repas). Appuyer de nouveau sur M pour régler un rappel de test postprandial (après repas).	Lorsque le rappel sonne, le lecteur s'active et le résultat du test préprandial (avant repas) s'affiche.  Appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour couper le rappel sonore et deux fois pour désactiver le lecteur. Effectuer un autre test sanguin et le marquer à l'aide d'un 🍏 marqueur postprandial (après repas) (voir tableau de gauche).
Après repas Marque un résultat de test effectué après le repas. Appuyer sur ▲ ou ▼	 (Clignote)	Appuyer sur M		Le résultat est marqué comme test postprandial (après repas).	
Journal Marque tout résultat comme étant unique ou différent d'une façon ou d'une autre. Appuyer sur ▲ ou ▼	 (Clignote)	Appuyer sur M		Le résultat est marqué en mémoire comme unique. Vous devriez le noter dans votre journal.	

 Établit un rappel (préréglage à 2 heures) pour réaliser un test postprandial (après le repas). Consulter le manuel d'utilisation pour prendre connaissance des consignes complètes sur la manière d'utiliser les marqueurs et de régler les heures de rappel.

Codes d'erreur et symboles

Consulter votre manuel d'utilisation pour une liste complète.

E1 	Température hors des limites.
E2 	Il y a eu des difficultés à remplir complètement la bandelette réactive. Recommencer le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.
E3 	Le lecteur de glycémie détecte une bandelette réactive usagée ou l'utilisation d'une mauvaise solution de contrôle. Recommencer le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.
E11	Résultat anormal. Recommencer le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.

Importé et distribué par :
Ascensia Diabetes Care France SAS CS20073
20/26 Boulevard du Parc
92521 Neuilly sur Seine CEDEX
France

0 800 34 22 38 Service & appel gratuits

www.diabetes.ascensia.com

